



Quality for life


# Pointer

## Veća mobilnost na terenu

Košarkaška kolica za rekreacijsko bavljenje sportom ima više opcija prilagodbe tako da potrebe sportaša budu zadovoljene. Visina sjedišta, dužina potkoljenice i težišta modu se podešavati kako bi odgovarali potrebama i tjelesnoj konstituciji korisnika. Dodatno, Pointer je ually adjusted to meet your requirements and body measurements. Furthermore, the Pointer complies with current IWBF regulations and creates the best conditions for you to bring your love of basketball onto the court.

### **Prednosti**

- Prilagodljiva sportska kolica
- Mogućnost podešavanja nagiba sjedišta, težišta, kuta nagiba naslona za leđa i dr.
- Prilagodljiva presvlaka naslona za leđa
- Dizajnirano u skladu s pravilima IWBF

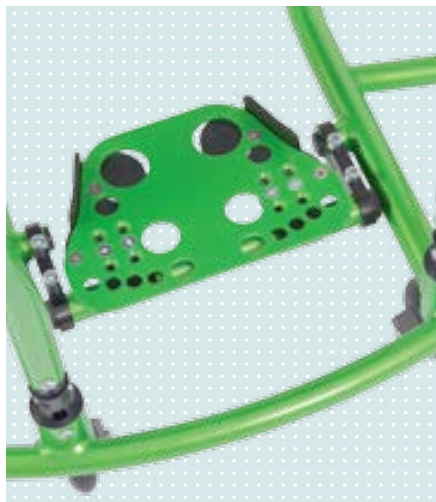

- Visina i podešavanje nagiba omogućuju da se oslonac za stopala optimalno prilagodi dužini potkoljenice.



- Visina sjedišta Poinera može se podešavati.



- Mogućnost pomicanja točke težišta



- Podešavanje nagiba naslona za leđa.

### Oprema

- Prilagodljiva kolica čvrstog okvira s odbojnikom
- Podešavanje napetosti sjedišta
- Podešavanje presvlake naslona za leđa
- Oslonci podesivi po visini i kutu
- Pogonski kotači s brzootpuštajućom oprugom
- Sportski kotačići 3"
- Schwalbe RightRun guma, 1"
- Standardna boja okvira aluminij

Jednostavna zaštita protiv prevrtanja

### Dodatna oprema

- Standard seat cushion 30 or 50 mm
- Powder-coated frame colour
- Transparent spoke protectors
- Various push rings

### Tehnički podaci

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Širina sjedišta                 | dostupno od 340 do 460 mm (u koracima po 20 mm) |
| Dubina sjedišta                 | dostupno od 360 do 480 mm (u koracima po 20 mm) |
| <b>Prednja visina sjedišta</b>  |   |
| Dubina                          | 450/470/490 mm                                  |
| Visina                          | 490/510/530 mm                                  |
| <b>Stražnja visina sjedišta</b> |   |
| Dubina                          | dostupno od 370 do 450 mm (u koracima po 20 mm) |
| Visina                          | dostupno od 430 do 530 mm (u koracima po 20 mm) |
| Visina naslona za leđa          | dostupno od 250 do 500 mm (u koracima po 50 mm) |
| Max. težina korisnika           | 120 kg  |
| Odmak prednjeg dijela okvira    | 20 mm   |
| Nagib kotača                    | 18°   |